


<p style="text-align: center;">Arbeitstisch</p> <p style="text-align: center;">Kodak Medical X-ray processor</p> <p style="text-align: center;">Montageanleitung</p> <p style="text-align: center;">Bestellnummer: 1267-0-0002</p>	<p style="text-align: center;">Base table</p> <p style="text-align: center;">Kodak Medical X-ray processor</p> <p style="text-align: center;">Assembly instruction</p> <p style="text-align: center;">Order number : 1267-0-0002</p>
---	---

Lieferumfang :		Part list of shipment :	
Rahmen links	1x	frame left	1x
Rahmen rechts	1x	frame right	1x
Querstrebe	2x	cross bar	2x
Zylinderschraube M8x25 DIN 912	4x	bolt M8x25 DIN 912	4x
Senkschraube M6x40 DIN 7991	4x	bolt M6x40 DIN 7991	4x
Abdeckkappe	4x	sealing plug	4x
Innensechskantschlüssel SW 4	1x	allan key (size 4)	1x
Innensechskantschlüssel SW 6	1x	allan key (size 6)	1x



<p>Montageanleitung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. An der Maschine die Seitenstreifen der Bodenplatte entfernen. 2. Querstrebe mit dem Rahmen verschrauben. 3. Maschine auf Gestell montieren. 4. Höhe einstellen. (mit Wasserwaage ausrichten) 5. Alle Schrauben des Gestells fest anziehen. 	<p>Assembly instruction:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Remove side parts of the floor plate from the processor. 1. Screw together cross-bars with the frame. 2. Mount machine onto base-table. 3. Adjust height. (with spirit level) 4. Tighten all screws from the base table.
---	---

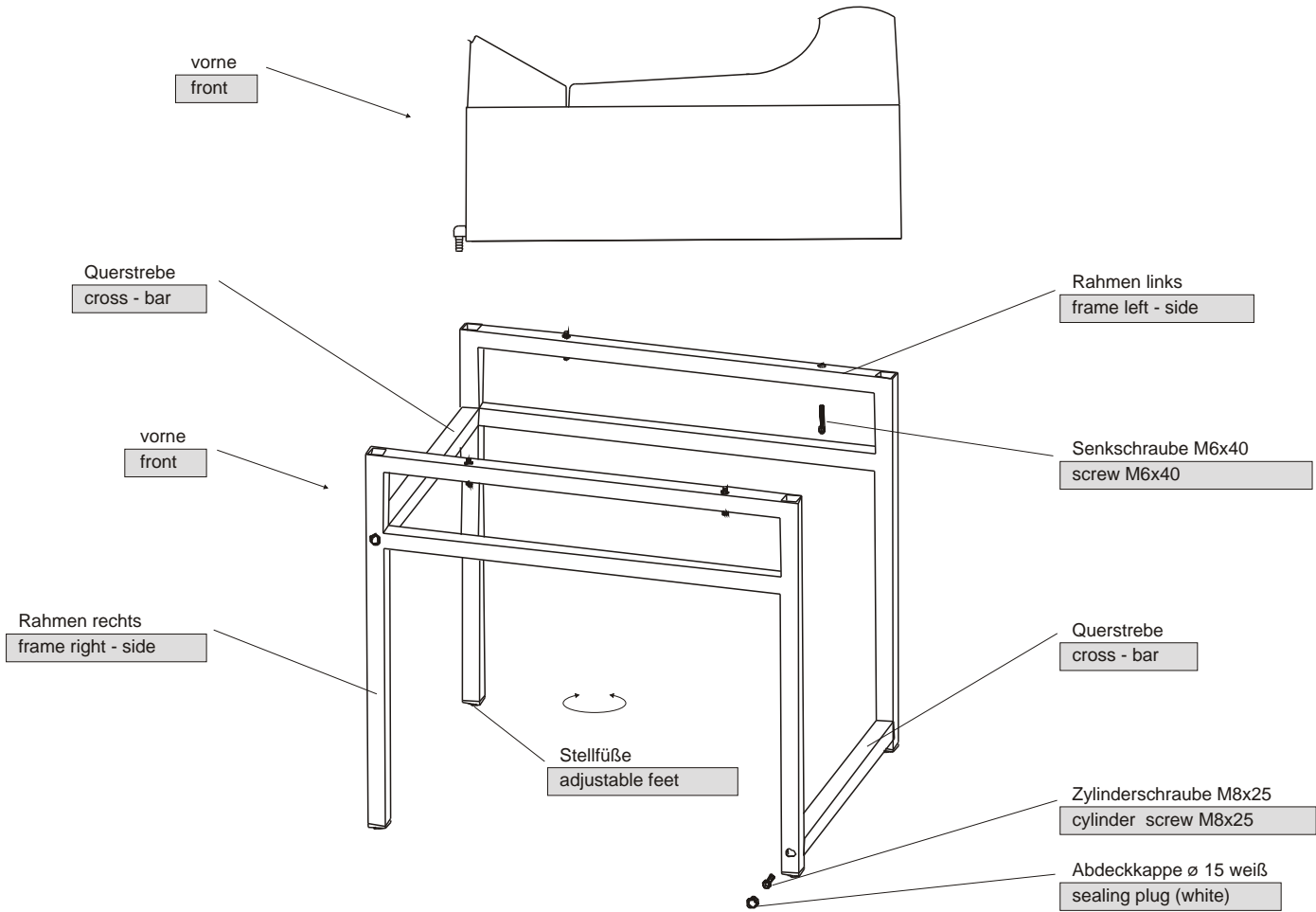

EASTMAN KODAK
Rochester, New York 14650, USA